



CooperVision®  
Live Brightly.®

# CooperVision® Israel

## קטלוג מוצרים



מחזרים לפרטפוליון של 100%

בנוסף קטלוג למוצרים

# תוכן עניינים

## עדשות מדף:

עדשות מגע יומיות

עדשות מגע חודשיות

עדשות מגע מולטיפוקל

## עדשות מיוחדות

עדשות מגע רכות - משפחת Biofinity

עדשות מגע גמישות נושמות quasar ועוד

עדשות גמישות נושמות לקרטוקונוס

סמי סקלרליות

עדשות מגע היברידיות

עדשות מגע לאורטוקרתולוגיה


## מדריכי התאמה, מחשבונים וכלי עזר:

יישומון OptiExpert™

מדריך התאמה - עדשות מגע טוריות

מדריך התאמה - עדשות מגע מולטיפוקל

מדריך התאמה - עדשות מגע MiSight® 1 day

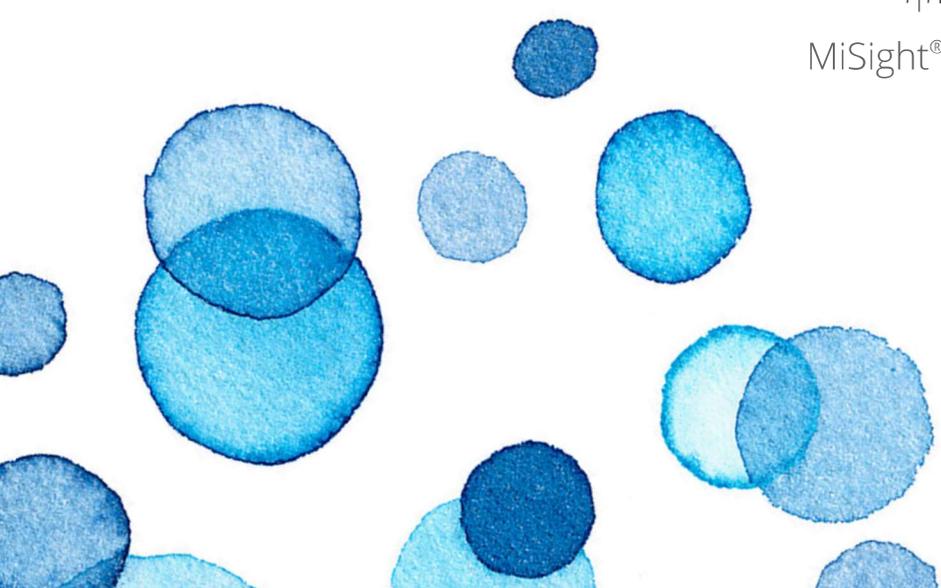



מנהלים את המיופיה עם משפחת

# MiSight®

כבר מגיל 6!

הוכח מחקרית



עדשות המגע MiSight® 1 day

היחידות בישראל עם אישור FDA\*



חומר גלם	קימור	קוטר	כוח ספרי	דילוג	מחיר מומלץ
Omafilcon A :תכולת נוזל: 60%	8.7	14.2	-0.25 to -6.00	0.25	קופסה בודדת - 175 ש"ח בעסקה שנתיית - 165 ש"ח, 3,960 ש"ח
			-6.50 to -10.00	0.50	


\* נכון לתאריך 01.01.2026

## משקפי MiSight®

יעילים בהאטת המיופיה החל מגיל 6<sup>Δ1</sup>




Index	קוטר	כוח ספרי	צילינדר	מחיר מומלץ
1.53	70	-0.25 to -8.00 (0.25D steps)	0.00 to -2.00 (0.25 D steps)	<b>1:53</b> : מחיר לזוג עדשות - 360 ש"ח מחיר לצרכן - 1,490 ש"ח
1.67	75	-0.25 to -6.00 (0.25D steps)	0.00 to -2.00 (0.25 D steps)	<b>1:67</b> : מחיר לזוג עדשות - 460 ש"ח מחיר לצרכן - 1,990 ש"ח
1.67	70	-6.25 to -8.00 (0.25D steps)	בהתאם לגרף	ניתן לקבל שירות מסגור בעלות של 35 ש"ח

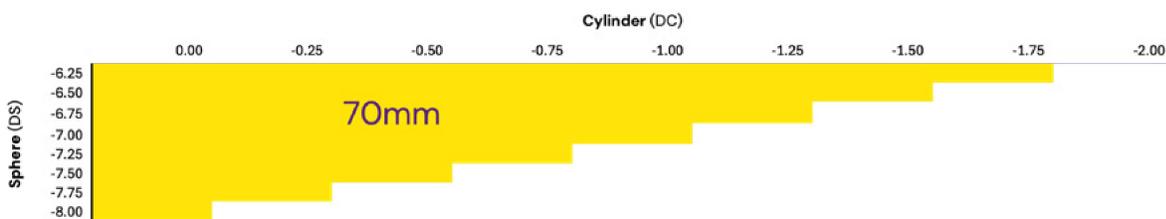

# עדשות מגע ספריות - יומיות

שם המוצר / חומר גלם	קימור	קוטר	כוח ספרי	זילוג	מחיר מומלץ
 <p><b>MyDay®</b> Stenfilcon A תכולת נוזל: 54%</p>	8.4	14.2	-0.25 to -6.00 -6.50 to -12.00 +0.25 to +5.00 +5.50 to +8.00	0.25 0.50 0.25 0.50	קופסא: 195 ש"ח עסקה שנתית: 145 לקופסא, ש"ח 3,480
 <p><b>DISPO™ Bio 1 day</b> Stenfilcon A תכולת נוזל: 54% <b>מבצע 3+1 לאורך כל השנה</b></p>	8.4	14.2	-0.25 to -6.00 -6.50 to -12.00 +0.25 to +5.00 +5.50 to +8.00	0.25 0.50 0.25 0.50	קופסא: 195 ש"ח עסקה שנתית: 145 לקופסא, ש"ח 3,480
 <p><b>clariti® 1 day</b> Somofilcon A תכולת נוזל: 56%</p>	8.6	14.1	-0.50 to -6.00 -6.50 to -10.00 +0.25 to +6.00 +6.50 to +8.00	0.25 0.50 0.25 0.50	קופסא: 30: ש"ח 165 עסקה שנתית: 125 לקופסא, ש"ח 3,000  קופסא: 90: עסקה שנתית: 315 לקופסא, ש"ח 2,520
 <p><b>DISPO™ AIR 1 DAY</b> Somofilcon A תכולת נוזל: 56%</p>	8.6	14.0	-0.50 to -6.00 -6.50 to -10.00 +0.50 to +6.00 +6.50 to +8.00	0.25 0.50 0.25 0.50	קופסא: 135 ש"ח עסקה שנתית: 100 לקופסא, ש"ח 2,400
 <p><b>Biomedics® 1 day Extra</b> Ocufilecon D תכולת נוזל: 55%</p>	8.6 (-power) 8.8 (+power)	14.2	-0.25 to -6.00 -6.50 to -10.00 +0.25 to +5.00 +5.50 to +6.00	0.25 0.50 0.25 0.50	קופסא: 110 ש"ח עסקה שנתית: 85 לקופסא, ש"ח 2,040


יורד במהלך השנה

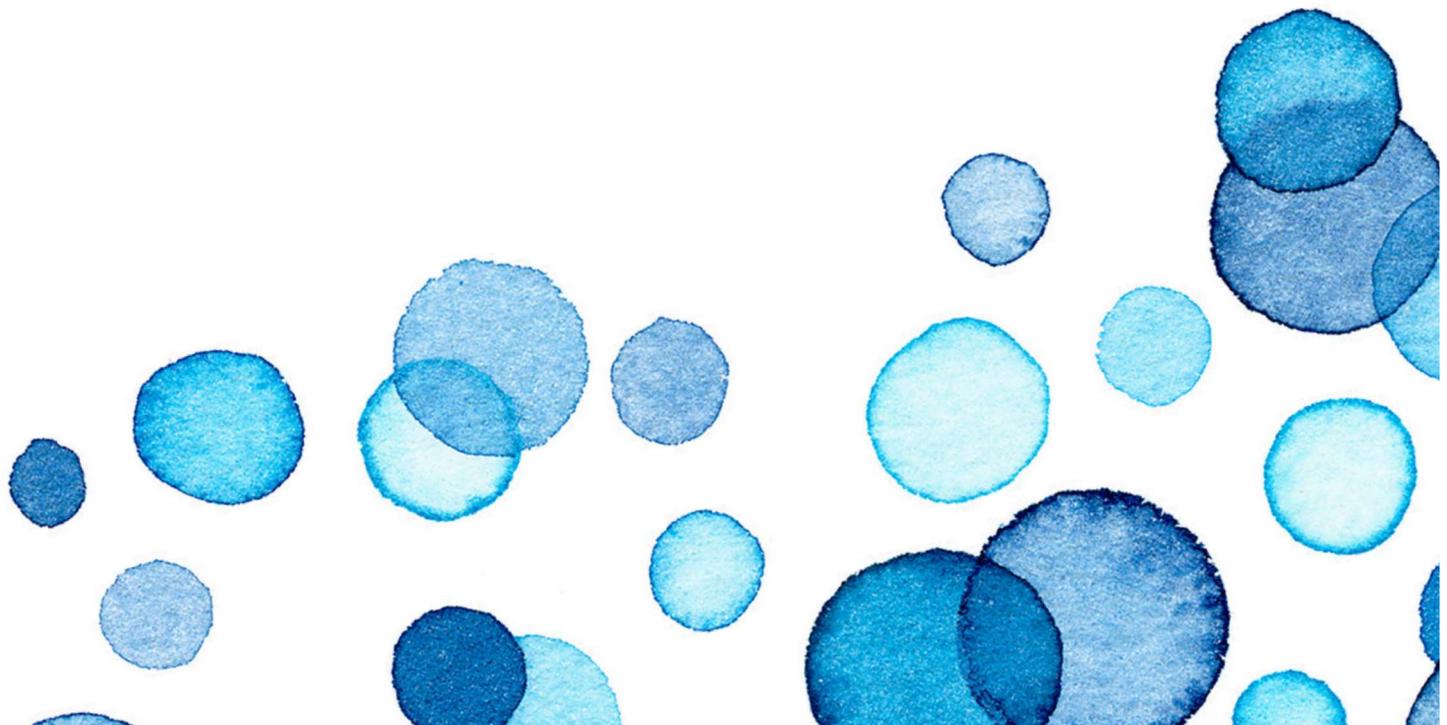

# עדשות מגע טוריות - יומיות

שם המוצר / חומר גלם	קימור	קוטר	כוח ספרי	דילוג	צילינדר	זווית	מחיר מומלץ
 <p><b>MyDay® toric</b> Stenfilcon A תכולת נוזל: 54%</p>	8.6	14.5	Plano to -6.00	0.25	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	10° to 180° (10° steps)	קופסא: 235 ש"ח  עסקה שנתית: 175 לקופסא, 4,200 ש"ח
			-6.50 to -10.00	0.50			
			+0.25 to +6.00	0.25			
			+6.50 to +8.00	0.50			
 <p><b>DISPO™ Bio 1 day toric</b> Stenfilcon A 54% תכולת נוזל: <b>מבצע 3+1 לאורך כל השנה</b></p>	8.6	14.5	Plano to -6.00	0.25	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	10° to 180° (10° steps)	קופסא: 235 ש"ח  עסקה שנתית: 175 לקופסא, 4,200 ש"ח
			-6.50 to -10.00	0.50			
			+0.25 to +6.00	0.25			
			+6.50 to +8.00	0.50			
 <p><b>clariti® 1 day toric</b> Somofilcon A 56% תכולת נוזל:</p>	8.6	14.3	+0.00 to -6.00	0.25	-0.75 -1.25 -1.75  -2.25	10° to 180° (10° steps)	קופסא: 205 ש"ח  עסקה שנתית: 155 לקופסא, 3,720 ש"ח
			-6.50 to -9.00	0.50	-0.75 -1.25 -1.75	10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°	
			+0.25 to +4.00	0.25	-0.75 -1.25 -1.75	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°	
						10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	
 <p><b>Biomedics® 1 day Extra toric</b> Ocufilecon D 55% תכולת נוזל:</p>	8.7	14.5	Plano to -6.00	0.25	-0.75 -1.25 -1.75	20°, 90°, 160°, 180°	קופסא: 195 ש"ח  עסקה שנתית: 150 לקופסא, 3,600 ש"ח
			-6.50 to -7.00	0.50	-0.75 -1.25 -1.75	90°, 180°	

יורד במהלך השנה

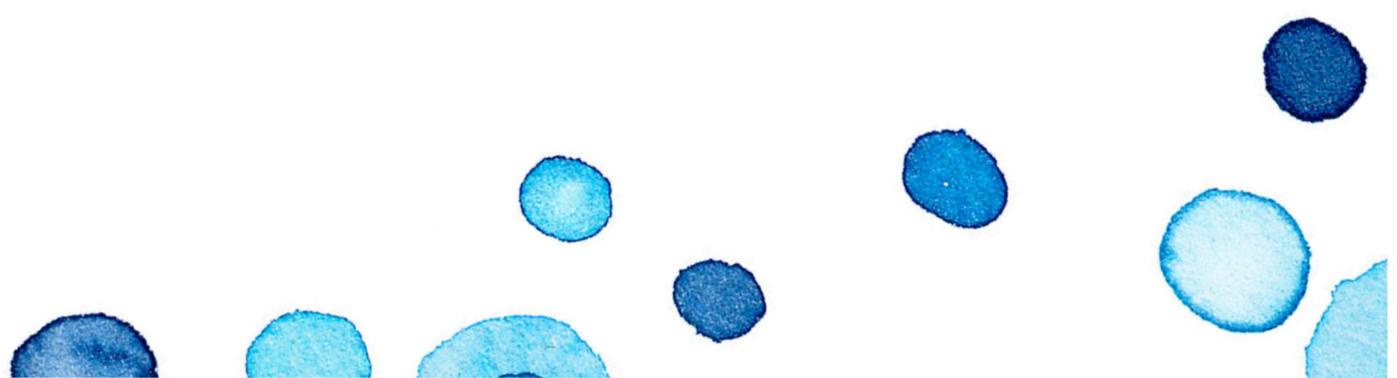


## עדשות מגע ספריות - חודשיות

שם המוצר / חומר גלם	קימור	קוטר	כוח ספרי	דילוג	מחיר מומלץ
 <b>DISPO BIO</b> Comfilcon A תכולת נוזל: 48%	8.6	14.0	-0.25 to -6.00 -6.50 to -12.00 +0.25 to +6.00 +6.50 to +8.00	0.25 0.50 0.25 0.50	₪ 300
 <b>Biofinity®</b> Comfilcon A תכולת נוזל: 48%	8.6	14.0	-0.25 to -6.00 -6.50 to -12.00 +0.25 to +6.00 +6.50 to +8.00	0.25 0.50 0.25 0.50	₪ 300
 <b>Biofinity® XR</b> Comfilcon A תכולת נוזל: 48%	8.6	14.0	-12.50 to -20.00 +8.50 to +15.00	0.50	3 עדשות ₪ 200
 <b>DISPO™ AIR</b> fanfilcon A תכולת נוזל: 55%	8.4	14.2	-0.25 to -6.00 -6.50 to -12.00 +0.25 to +6.00 +6.50 to +8.00	0.25 0.50 0.25 0.50	₪ 150
 <b>Avaira Vitality™</b> fanfilcon A תכולת נוזל: 55%	8.4	14.2	-0.25 to -6.00 -6.00 to -12.00 +0.25 to +6.00 +6.00 to +8.00	0.25 0.50 0.25 0.50	₪ 150
 <b>DISPO™ PLUS</b> Ocufilcon D תכולת נוזל: 55%	8.6 8.9	14.2	-0.25 to -6.00 -6.50 to -10.00 +0.25 to +5.00 +5.50 to +8.00	0.25 0.50 0.25 0.50	₪ 150
 <b>Biomedics® 55 Evolution</b> Ocufilcon D תכולת נוזל: 55%	8.6 8.9	14.2	-0.25 to -6.00 -6.50 to -10.00 +0.25 to +5.00 +5.50 to +8.00	0.25 0.50 0.25 0.50	₪ 150


## עדשות מגע חודשיות צבעוניות

שם המוצר / חומר גלם	קימור	קוטר	כוח ספרי	צבעים	מחיר מומלץ
 <b>Colors™</b> Polyhema תכולת נוזל: 43%	8.6	14.2	-1.00 to -6.00 (0.25 steps)  +1.00 to +4.00 (0.50 steps)	Green, Gray, Blue, Pure Hazel	₪ 110

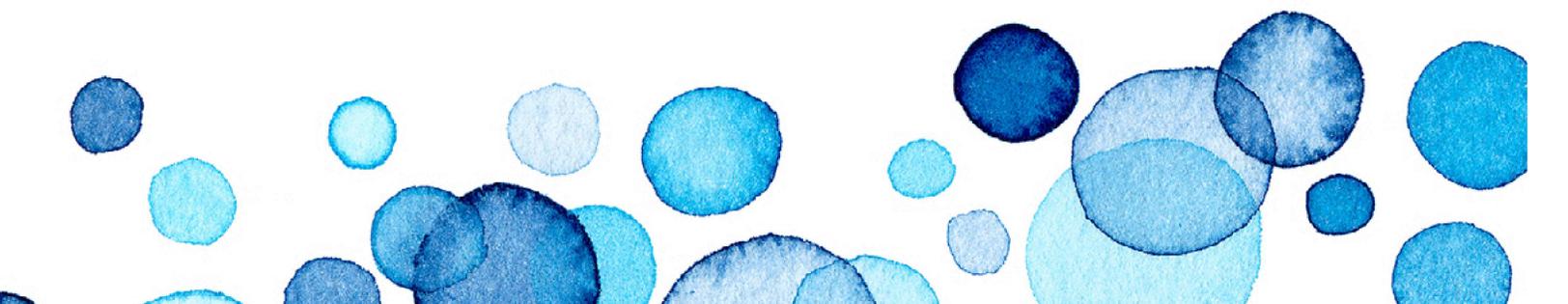

# עדשות מנגע טוריות - חודשיות

שם המוצר / חומר גלם	קימור	קוטר	כוח ספרי	דילוג	צילינדר	זווית	מחיר מומלץ
 <b>DISPO™ BIO Toric</b> Comfilcon A תכולת נוזל: 48%	8.7	14.5	Plano to -6.00 -6.50 to -10.00 +0.25 to +6.00 +6.50 to +8.00	0.25 0.50 0.25 0.50	-0.75 to -2.25 (0.50 steps)	10° to 180° (10° steps)	6 עדשות ע"מ 500
 <b>Biofinity® toric</b> comfilcon A 48% תכולת נוזל: לא תתאפשר החזרת קופסאות הזמנת חו"ל*	8.7	14.5	-0.25 to -6.00 -6.50 to -10.00 Plano to +6.00 +6.50 to +8.00	0.25 0.50 0.25 0.50	-0.75 to -2.25 (0.50 steps)	10° to 180° (10° steps)	3 עדשות ע"מ 250
 <b>Biofinity® XR toric</b> comfilcon A 48% תכולת נוזל: לא תתאפשר החזרת קופסאות הזמנת חו"ל*	8.7	14.5	+8.50 to +20.00 -10.50 to -20.00  Plano to -6.00 -6.00 to -20.00 +0.25 to +6.00 +6.00 to +20.00	0.50  0.25 0.50 0.25 0.50	-0.75 to -2.25 (0.50 steps)  -2.75 to -5.75 (0.50 steps)	5° to 180° (5° steps)	6 עדשות ע"מ 915  3 עדשות ע"מ 515
 <b>DISPO™ AIR Toric</b> fanfilcon A תכולת נוזל: 55%	8.5	14.5	Plano to -6.00 -6.50 to -10.00 +0.25 to +6.00 +6.50 to +8.00	0.25 0.50 0.25 0.50	-0.75 to -2.25 (0.50 steps)	10° to 180° (10° steps)	6 עדשות ע"מ 400
 <b>Avaira Vitality® toric</b> fanfilcon A תכולת נוזל: 55% הזמנת חו"ל*	8.5	14.5	Plano to -6.00 -6.50 to -10.00 +0.25 to +6.00 +6.50 to +8.00	0.25 0.50 0.25 0.50	-0.75 to -2.25 (0.50 steps)	10° to 180° (10° steps)	6 עדשות ע"מ 400
 <b>DISPO™ PLUS Toric</b> Ocufilecon D תכולת נוזל: 55%	8.7	14.5	Plano to -6.00 -6.50 to -9.00 -6.00 to +5.00 +5.50 to 6.00	0.25 0.50 0.50 0.25	-0.75 to -2.25 (0.50 steps)	10° to 180° (10° steps)	6 עדשות ע"מ 400
 <b>Biomedics® Toric</b> Ocufilecon D תכולת נוזל: 55%	8.7	14.5	Plano to -6.00 -6.50 to -9.00 -6.00 to +5.00 +5.50 to 6.00	0.25 0.50 0.50 0.25	-0.75 to -2.25 (0.50 steps)	10° to 180° (10° steps)	6 עדשות ע"מ 400

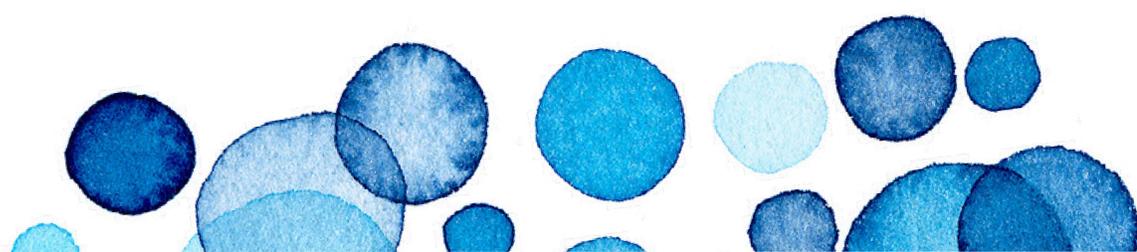

## עדשות מגע מולטיפוקל - יומיות

שם המוצר / חומר גלם	קימור	קוטר	כוח ספרי	דילוג	ADD	מחיר מומלץ
 <p><b>MyDay® multifocal</b> Stenfilcon A תכולת נוזל: 54%</p>	8.4	14.2	+8.00 to -10.00 -10.50 to -12.00	0.25 0.50	Low +0.75 to +1.25 Med +1.50 to +1.75 High +2.00 to +2.50	קופסא: 230 ש"ח עסקה שנתית: 170 ש"ח 4,080 ש"ח
 <p><b>DISPO™ Air Multi 1 Day 3ADD</b> Somofilcon A תכולת נוזל: 56%</p>	8.6	14.1	+8.00 to -10.00 -10.50 to -12.00	0.25 0.50	Low +0.75 to +1.25 Med +1.50 to +1.75 High +2.00 to +2.50	קופסא: 230 ש"ח עסקה שנתית: 170 ש"ח 4,080 ש"ח

## עדשות מגע מולטיפוקל - חודשיות

שם המוצר / חומר גלם	קימור	קוטר	כוח ספרי	דילוג	ADD	זווית	מחיר מומלץ
 <p><b>Biofinity® multifocal</b> Comfilcon A עיצוב: CN/ CD תכולת נוזל: 48%</p>	8.6	14.0	+6.00 to -6.00 -6.50 to -10.00	0.25 0.50	+1.00 +1.50 +2.00 +2.50	6 עדשות ש"ח 650	
 <p><b>Biofinity® multifocal toric</b> Comfilcon A עיצוב: CN/ CD תכולת נוזל: 48% לא תתאפשר החזרת קופסאות *הזמנת חי"ל</p>	8.7	14.5	Plano to -6.00 -6.50 to -10.00 +0.25 to +6.00 +6.50 to +10.00	0.25 0.50 0.25 0.50	-0.75 to -5.75 (0.50 steps) +1.00 to +2.50 (0.50 steps)	3 עדשות ש"ח 550 5° to 180° (5° steps)	



CooperVision®  
Live Brightly.®

# קטלוג עדשות מגע Specialty

מחויבים אליכם ואל המטופלים שלכם



# עדשות מגע רכות

שם המוצר	חומר גלם	בסיס (מ"מ)	קוטר (מ"מ)	תחום עוצמה	DK/t @-3.00	עיצוב עדשה	מחיר מומלץ
<b>Biofinity®</b>	comfilcon A תכולת נוזל: 48%	8.6	14	-0.25 to -6.00D (0.25D) -6.50 to -12.00D (0.50D) +0.25 to +6.00D (0.25D) +6.50 to +8.00D (0.50D)	160	Aspheric optics	6 עדשות ש 300
<b>Biofinity® XR</b>	comfilcon A תכולת נוזל: 48%	8.6	14	-12.50 to -20.00D (0.50D) +8.50 to +15.00D (0.50D)	160	Aspheric optics	3 עדשות ש 200

שם המוצר	חומר גלם	בסיס (מ"מ)	קוטר (מ"מ)	תחום עוצמה	צילינדר	זווית	DK/t @-3.00	עיצוב עדשה	מחיר מומלץ
<b>Biofinity® Toric</b>	comfilcon A תכולת נוזל: 48%	8.7	14.5	-0.25 to -6.00DS (0.25D) -6.50 to -10.00DS (0.50D) Plano to +6.00DS (0.25D) +6.50 to +8.00DS (0.50D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	10 to 180 (10° steps)	116	Optimised Toric Lens Geometry™	3 עדשות ש 250
<b>Biofinity® XR Toric</b> הזמנת חו"ל*	comfilcon A תכולת נוזל: 48%	8.7	14.5	-10.50 to -20.00DS (0.50D) +8.50 to +20.00DS (0.50D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	5 to 180 (5° steps)	116	Optimised Toric Lens Geometry™	6 עדשות ש 915
			-20.00 to +20.00DS (0.50D steps after ±6.00DS)	-2.75 -3.25 -3.75 -4.25 -4.75 -5.25 -5.75	3 עדשות ש 515				

שם המוצר	חומר גלם	בסיס (מ"מ)	קוטר (מ"מ)	תחום עוצמה	תוספת לקריאה	DK/t @-3.00	עיצוב עדשה	מחיר מומלץ
<b>Biofinity® multifocal</b>	comfilcon A תכולת נוזל: 48%	8.6	14	-0.25 to -6.00D (0.25D) -6.50 to -10.00D (0.50D) Plano to +6.00D (0.25D)	+1.00, +1.50, +2.00, +2.50	142 (-3.00, N lens, +1.00 Add)	Balanced Progressive® Technology: D and N designs	6 עדשות ש 650

שם המוצר	חומר גלם	בסיס (מ"מ)	קוטר (מ"מ)	תחום עוצמה	צילינדר	זווית	תוספת לקריאה	DK/t @-3.00	עיצוב עדשה	מחיר מומלץ
<b>Biofinity® multifocal Toric</b>	comfilcon A תכולת נוזל: 48%	8.7	14.5	-0.25 to -6.00DS (0.25D) -6.50 to -10.00DS (0.50D) Plano to +6.00DS (0.25D) +6.50 to +10.00DS (0.50D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25 -2.75 -3.25 -3.75 -4.25 -4.75 -5.25 -5.75	5 to 180 (5° steps)	+1.00, +1.50, +2.00, +2.50	116	Balanced Progressive® Technology: D and N designs Optimised Toric Lens Geometry™	3 עדשות ש 550

**להתאמה פשוטה ומהירה היעזרו באפליקציית OptiExpert**

ניתן להורדה בחינם מחנות האפליקציות סיסמה ראשונית לכניסה

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

## חשוב לדעת.


זמני אספקה לעדשות ה-XR - כ- 6 שבועות.



עדשות דיאגנוסטיקה זמינות במלאי בצילינדרים -2.75 \ -3.75 במרשמים מ-10.00 ועד +5.00, בקפיצות של 0.50D ובזוויות של 10°-180° על מנת לאפשר התאמה למגוון רחב של פרמטרים.

# משפחת Biofinity®

עדשות מגע פרימיום עם מגוון המרשמים הרחב ביותר\*1!

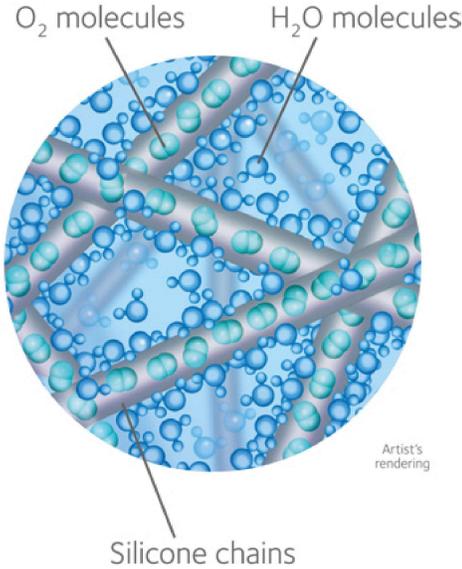


## חומר הגלם - שימוש בטכנולוגיית Aquaform® לתחושת לחות ועבירות חמצן מיטבית

טכנולוגיית Aquaform® לוכדת וסופחת מים וכך העדשה נשארת לחה, אפילו אם ממצמצים מעט.

שרשראות סיליקון ארוכות הקשורות במולקולות מים, לכן מעבר החמצן הוא אופטימלי כדי להשאיר את העיניים בהירות, לבנות ובריאות.



מודולוס מיטבי

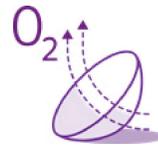


מעבר חמצן גבוה




הרטבה טבעית

## עיצוב המשטח לנוחות משופרת

עמידות למשקעים  
בזכות המשטח החלק  
והלחות הגבוהה שבה.

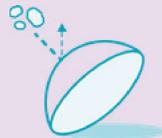

עיצוב קצוות מעוגלים  
גימור קצה העדשה (Edge) אופטימלי להפחתת  
האינטראקציה עם הלחמית עבור נוחות משופרת

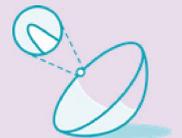

## אופטיקה - לביצועי ראייה יוצאים מן הכלל

כל עדשה ממשפחת Biofinity® היא יצירת מופת עיצובית לתיקון ראייה מסוים ומרשם ספציפי, כך שיותר מרכיבי עדשות מגע יכולים ליהנות מביצועי ראייה מעולים.



עבור פרסביופיה

### Biofinity® multifocal


טכנולוגיית Balanced Progressive® עם מספר אזורי תיקון לחדות ראייה במרחקים קרובים, רחוקים וביניים. מותאם לכל עוצמה ספרית ותוספת (ADD) עם אפשרות להתאמה של עדשה עם מרכז לקרוב או לרחוק.



עבור אסטיגמציה

### Biofinity® toric

Optimized Toric Lens Geometry™ לראייה יציבה וחדה והתאמה קלה. במרשמים סטנדרטיים ובפרמטרים מורחבים.

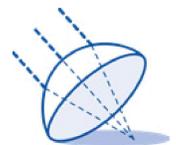

למיופיה והיפרופיה

### Biofinity® sphere

מערכת לנטרול אברציות עיצוב קדמי אספרי ייחודי שמנטרל אברציות ספריות בעדשה ובעין להשגת חדות גבוהה יותר בכל טווח הפרמטרים.

# עדשות מגע גמישות נושמות quasar ועוד

## עדשות מגע גמישות נושמות ספריות (GP)

שם המוצר	גאומטריה	קוטר	בסיסים	תחום עוצמה	הוראות התאמה	מחיר מומלץ
<b>Quasar SV</b> 11180	Aspheric	8.80 to 11.20mm in 0.1 mm steps	7.00 to 9.00mm in 0.05mm steps	-25.00 to +25.00 in 0.25D steps	ON Flat K*	₪ 735
<b>Multicurve</b> 11200	2 to 5 curves	8.50 to 10.50 in 0.1mm steps	4.50 to 10.50mm in 0.05mm steps"	-40.00 to +40.00 in 0.25D steps	-	₪ 735

\*UP TO 1.50D CYL | Flat K +0.1 - CYL 1.50 to 2.50D  
מומלץ השימוש בסט התאמה.

## עדשות מגע גמישות נושמות טוריות (GP)

שם המוצר	גאומטריה	קוטר	בסיסים	תחום עוצמה	עוצמת הצילינדר והזווית	מחיר מומלץ
<b>Quasar SV front toric</b> 11220	Aspheric	8.80 to 10.00 in 0.1mm steps"	7.00 to 9.00mm in 0.05mm steps	-25.00 to +25.00 in 0.25D steps	-0.25 to -12.00 in 0.25D steps at any axis	₪ 850
<b>Quasar toric</b> 11220	Multi-aspheric	8.80 to 10.00 in 0.1mm steps	7.00 to 9.00mm in 0.05mm steps	-25.00 to +25.00 in 0.25D steps	Toric Periphery: 0.2 to 0.8 in 0.1mm steps Default: 0.4mm	₪ 850
<b>Multicurve toric</b> 11250	back/front toric	8.50 to 10.50 in 0.1mm steps	4.50 to 10.50 in 0.05mm steps	-40.00 to 40.00 in 0.25D steps	-	₪ 900

## עדשות מגע גמישות נושמות מולטיפוקל (GP)

שם המוצר	גאומטריה	קוטר	בסיסים	תחום עוצמה	תוספת לקריאה	הוראות התאמה	מחיר מומלץ
<b>Quasar FS Multifocal</b> 11450	Aspheric front surface Center Distance	8.80 to 10.00 in 0.1mm steps	7.00 to 8.60 in 0.05mm steps	-25.00 to +25.00 in 0.25D steps	0.75 to 3.00 in 0.25D steps	ON Flat K*	₪ 1,620
<b>Senso Select Zoom</b> 11506	Center Distance	9.30 to 10.80 in 0.30mm steps Standard - 9.90	7.10 to 8.50 0.05mm	-20.00 to +20.00 in 0.25D steps	+1.00 to +3.00 in 0.25DS steps	-	₪ 1,975
<b>Senso Select Duo</b> 11618	Segment	9.30 to 10.80 in 0.30mm steps Standard - 9.90	7.10 to 8.50 0.05mm	-20.00 to +20.00 in 0.25D steps	+1.00 to +3.00 in 0.25DS steps	-	₪ 2,105

## חומרי גלם לעדשות RGP

	שימוש	חדירות חמצן	צבע	USAN Name
<b>Optimum Extra</b>	Flexible Wear	100	Blue, grey	Roflufocon D

משפחת עדשות המנע RGP של Quasar מציעה חדות ראייה ונוחות יוצאות דופן, והן מעוצבות כך שיעמדו באתגרים שמציבים דרישות אורח החיים של המטופלים שלכם.

### Multicurve

עדשות בהתאמה אישית לבחירתכם (כתחליף לעדשות Special Hard/Tricurve).

### Quasar K

לקרטוקונוס

### Quasar FS

מולטיפוקל

### Quasar Toric

עדשות טוריות, Back&Front Toric Periphery

### Quasar SV

עדשות חד מוקדיות

✓ עדשות ממשפחת Quasar זמינות בשני חומרי גלם איכותיים: Optimum Extra, Boston XO להם עבירות חמצן גבוהה של 100DK, זווית הרטבה נמוכה לראייה איכותית ונוחות מעולה.

✓ כל העדשות עוברות טיפול פלאזמה, למשטח חלק ואיכותי יותר.

✓ לעדשות תכונה ייחודית לשינוי SAG העדשה המאפשרת שינוי של קצה העדשה במידה הצורך (הרמת קצה).

# עדשות גמישות נושמות לקרטוקונוס

## quasar K

שם המוצר	נאומטריה	קוטר	בסיסים	תחום עוצמה	הוראות התאמה	מחיר מומלץ
<b>Quasar K</b> 11200	Multi-Aspheric	8.80 to 9.60 in 0.1mm steps	5.70 to 8.00 in 0.05mm steps	-25.00 to +25.00 in 0.25D steps	Use Trial Lenses	₪ 890
<b>Quasar K front toric</b> 11250	Multi-Aspheric	8.80 to 9.60 in 0.1mm steps	5.70 to 8.00 in 0.05mm steps"	-25.00 to +25.00 in 0.25D steps CYL: Any axis	Use Trial Lenses	₪ 1,110

עדשות **Quasar K** משתמשות בתהליך ייצור CNC מתקדם ובטכנולוגיה המולטי - אספרית של משפחת Quasar לטובת דיזיין ייחודי למקרים עם קרטוקונוס. הייצור ברמת דיוק גבוהה משיג מעבר חלק ורציף בין הקימורים המשתנים ממרכז העדשה ועד הקצה.

### מדוע לבחור בעדשות Quasar K?

- משטח אחורי נטול מעברים (Junctionless)
- סנטרציה משופרת
- נוחות משופרת
- חומרי גלם עם DK100 לשמירה על בריאות הקרנית.

- מבנה בסיס העדשה תוכנן על פי גישה שהוכחה מחקרית - ככל שרדיוס הבסיס - **BOZR** קטן יותר:
- קוטר האזור האופטי BOZD קטן יותר
- מרווח הקצה (Edge Lift) גבוה יותר

## ROSE K

שם המוצר	נאומטריה	קוטר	בסיסים	תחום עוצמה	הוראות התאמה	מחיר מומלץ
<b>ROSE K2</b> 11404	Dynamic O.Z	7.50 to 11.00	4.20 to 8.80	Any	Use Trial Lenses	₪ 1,460
<b>ROSE K2 IC</b> 11449	Reverse Geometry	9.40 to 12.00	5.20 to 12.00	Any	Use Trial Lenses	₪ 1,685
<b>ROSE K2 PG</b> 11416	Reverse Geometry	9.00 to 12.50	5.20 to 11.60	Any	Use Trial Lenses	₪ 1,575

עדשות **ROSE K** לקרטוקונוס מאפשרות התאמה אישית למבנה הקרנית של כל מטופל, מה שמבטיח התאמה מדויקת ונוחות מקסימלית. בזכות הגיאומטריה המתקדמת שלהן והחומרים הנושמים, הן משפרות את הראייה בצורה משמעותית תוך שמירה על בריאות הקרנית, נוחות לשימוש ושיפור איכות החיים.



# סמי סקלרליות Rose K - I Onefit Med

שם המוצר	גאומטריה	קוטר	SAG	תחום עוצמה	הוראות התאמה	מחיר מומלץ
<b>ONEFIT MED</b> 111011	Spheric/ Toric/ Quadrant/ Multifocal	<b>15.6</b> , 16.00, 16.40	3800 to 6600	-25.00 to +30.00 CYL -0.50 to -10.00 at any axis ADD 0.75 to 4.0 in 0.25D steps	Use Trial Lenses	₪ 5,505
<b>Onefit MED+</b> Optimum Extreme / Optimum Infinite 111011	Spheric/ Toric/ Quadrant/ Multifocal	17	4100 to 7000	-40.00 to +40 in 0.25D steps CYL -0.25 to -6.00 in 0.25D steps at any axis ADD 0.75 to 4.0 in 0.25D steps	Use Trial Lenses	₪ 5,505
<b>ROSE K2 XL</b> 111011	-Spheric/ Toric/ Quadrant/ Multifocal	<b>14.60</b> , 13.60 to 16.00	Base curve 5.60 to 8.40	Any	Use Trial Lenses	₪ 5,505

## חומרי גלם לעדשות RGP

	שימוש	חדירות חמצן	צבע	USAN Name
<b>Optimum Extra</b>	Flexible Wear	100	Blue, Clear	Roflufocon D
<b>Optimum Infinite</b> רק עבור עדשות Onefit	Flexible Wear	180	Blue, Clear	Tisilfocon A

**Onefit MED** היא עדשה מיני סקלרלית עם התאמה אינטואיטיבית וקלה, שנותנת מענה למגוון רחב של בעיות. העדשה מאפשרת שליטה בתכנון ובהתאמה, כך שניתן לבצע התאמות באופן פשוט ונוח.

בעזרת כלי ההתאמה המתקדם של Onefit MED שזמין באתר [www.blanchardlab.com](http://www.blanchardlab.com), ניתן לראות את השינויים הצפויים ולקבל המחשה בנוגע לפרמטרים הסופיים של העדשה.



לאיזה מטופלים נתאים סמי סקלרליות Onefit MED?



העדשות נותנות מענה לכלל תיקוני הראייה הנדרשים: ספר, טורי ומולטיפוקל.

# עדשות מגע היברידיות - עדשה לחצי שנה

## SynergyEyes

שם המוצר	קוטר	בסיסים	תחום עוצמה	הוראות התאמה	מחיר מומלץ
<b>Ultra Health</b> 11472 For Keratoconus & Irregular Cornea Petrafocon A (Center) LensesHem LorafilconA 32% ( Skirt ). UVA+UVB	14.50	<b>SAG</b> 50 to 550 in 50µ Steps <b>Soft Skirt</b> 7.9 Steep, 8.1 Medium, 8.4 Flat, 8.7 Flat 2	+2.00 to -8.00 in 0.25D steps -8.50 to -20.00 in 0.50D steps +2.50 to +10.00 in 0.50D steps	Use Trial Lenses	₪ 1,520
<b>Duette HD</b> 11472 For high astigmatism Petrafocon A (Center) LensesHem LorafilconA 32% ( Skirt ). UVA+UVB	14.50	7.10 to 8.30 at 0.10mm steps <b>Soft Skirt</b> 8.1 Medium, 8.4 Flat, 8.7 Flat 2	+8.00 to -8.00 in 0.25D steps -8.50 to -15.00 in 0.50D steps +8.50 to +10.00 in 0.50D steps	Use Trial Lenses	₪ 1,520

עדשות מגע חצי שנתיות המיוצרות בשיטה ייחודית המשלבת עדשה קשה GP במרכז ופריפריה רכה סיליקון הידרוג'ל לראייה אופטימלית באמצעות אופטיקה אספרית של עדשות GP ונוחות מרבית בזכות עיצוב חצאית (פריפריה) של סיליקון הידרוג'ל ייחודי. לתיקון של עד -6.00D צילינדר קורניאלי.

עדשות **Duette** מתאימות לקרניות רגילות, גם במרשמים עם צילנדרים גבוהים וזמינות גם למטופלים פרסביופים בעיצוב מולטיפוקל.



עדשות **UltraHealth** נותנות מענה לקרניות אי-רגולריות ולמקרים שונים של קרטוקונוס.



מרכז ותנועה יציבים

חילוף דמעות יעיל במיוחד

העברת חמצן מקסימלית

## עדשות מגע לאורטוקרטולוגיה CRT

שם המוצר	קוטר	בסיסים	תחום עוצמה	הוראות התאמה	מחיר מומלץ
<b>CRT</b> 11449 HDS 100	9.50 to 12.00 in 0.50mm steps	6.50 to 10.50 in 0.1mm steps	+2.00D to -2.00D in 0.25D steps	מומלץ להשתמש במחשבון ONLINE, או בערכת ה- DDS	₪ 2,225
<b>CRT Dual Axis</b> 11551 HDS 100	10.00 to 11.50 in 0.50mm steps	7.80 to 9.20	+0.50	מומלץ להשתמש במחשבון ONLINE, או בערכת ה- DDS	₪ 2,340



### איך לבחור את המטופל המתאים?

- בעל מרשם: ספר -0.75 ועד -6.00 דיופטר,
- צילינדר עד -1.50 דיופטר (wtr) ועד -0.75 דיופטר (atr)
- הצילינדר קורניאלי
- מצב פיזיולוגי תקין של העין
- לא משתמש בתרופות
- מעל גיל שמונה
- בעל מוטיבציה
- בעל סדר יום מסודר

# מחירון טרייל סטים

## ערכות נסיון לעבודה עם עדשות מיוחדות

שם המוצר	מספר עדשות בסט	מחיר
ONEFIT MED	20	₪ 3,370
Rose K2	26	₪ 1,010
Rose K IC	14	₪ 1,010
Rose K PG	24	₪ 1,010
CRT DDS	100	₪ 14,120
SENSO SELECT ZOOM	18 Profile 1 for Myops Profile 2 for Hyperops	₪ 1,575
ULTRA HEALTH	26	₪ 3,850
DUETTE HD	18	₪ 3,210
Quasar SV	12	₪ 1,050
Quasar K	24	₪ 2,100

\* המחירים לא כוללים מע"מ  
\* השלמת עדשות טרייל סט - 50% ממחיר מחירון העדשה

# תמיסות וסבון לניקוי וטיפול בעדשות

## AVIZOR lipid clean

תמלה: 60ml



סבון לניקוי יומי לטיפול בעדשות מגע רכות ועדשות סיליקון הידרוג'ל

מחיר לצרכן

₪100

## EVER CLEAN PLUS



תמיסה חד שלבית מתקדמת לניקוי, חיטוי והסרת משקעים מעדשות מגע בשיטת מי חמצן 3%.

מחיר לצרכן

350ml + 45 tablets - ₪135

2X 350ml + 90 tablets - ₪240

## AVIZOR GP multi

תמלה: 240ml



תמיסה לשטיפה, ניקוי והשרייה לעדשות גמישות נושמות

מחיר לצרכן

₪120

## Alvera

תמלה: 350ml



תמיסה רב תכליתית המכילה אלורה לכל סוגי עדשות המגע הרכות. תוכנה במיוחד עבור עדשות מסיליקון הידרוג'ל.

מחיר לצרכן

₪100

## AVIZOR GP 1 cleaner

תמלה: 30ml



סבון לניקוי עדשות גמישות נושמות

מחיר לצרכן

₪85

## Unica

תמלה: 350ml



תמיסה רב-תכליתית המכילה חומצה היאלורונית לשיפור הנוחות לכל סוגי עדשות המגע הרכות.

מחיר לצרכן

₪75

## AVIZOR GP 2 conditioner

תמלה: 120ml



תמיסה לשטיפה והשרייה לעדשות גמישות נושמות

מחיר לצרכן

₪85

## Dispo


תמלה: 350ml



תמיסה רב-תכליתית המכילה מסיר חלבונים לכל סוגי עדשות המגע הרכות.

מחיר לצרכן

₪65

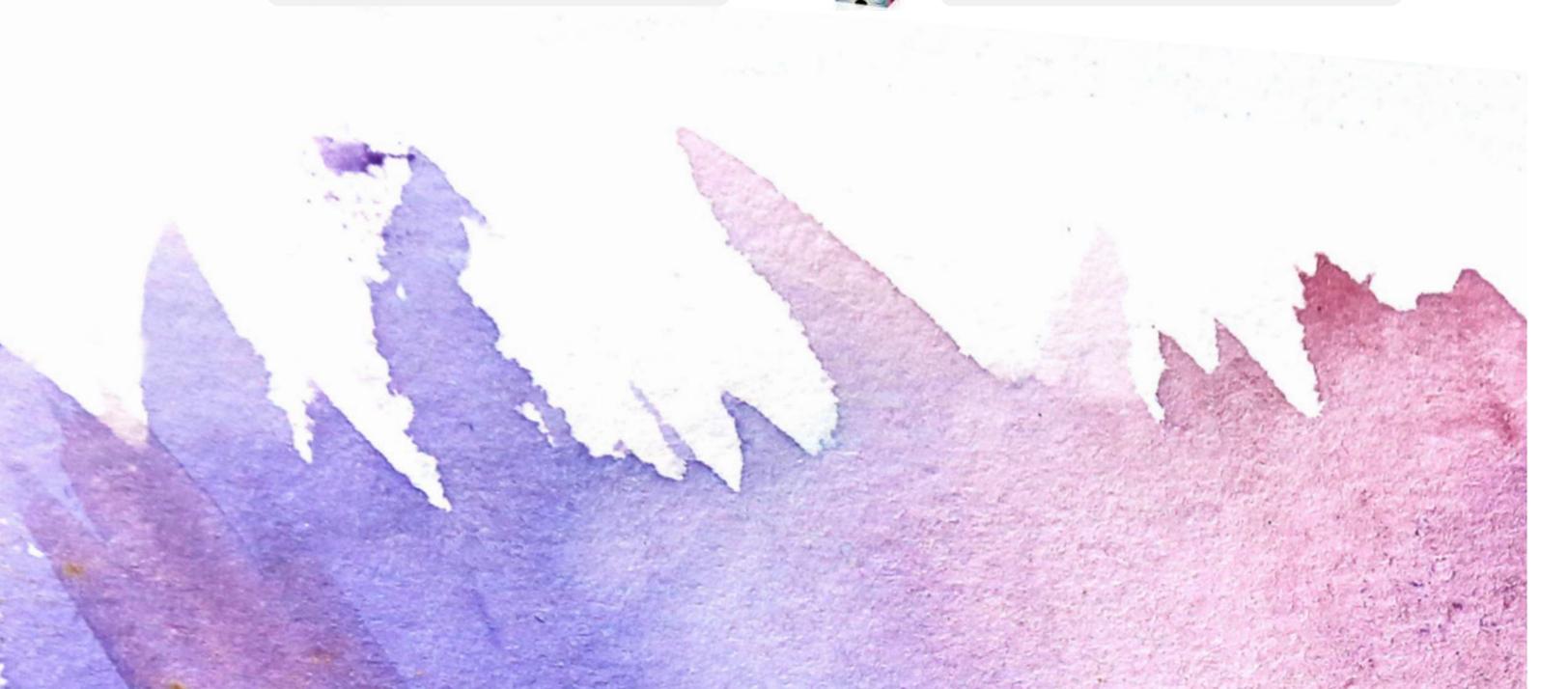

# תמיסות וסבון לניקוי וטיפול בעדשות

**AVIZOR LACRIFRESH** תמלה: 15ml  
moisture drops (lacrifresh)



טיפול הרטבה לכל סוגי עדשות המגע

מחיר לצרכן  
₪80

**AVIZOR saline unidose** תמלה: 30x5ml



אמפולות תמיסת סליין ללא חומר משמר

מחיר לצרכן  
₪110

**AVIZOR LACRIFRESH** תמלה: 15ml  
comfort drops (lacrifresh)



טיפול הרטבה להגברת הנוחות

מחיר לצרכן  
₪80

**Saline** תמלה: 350/500ml



תמיסת סליין סטרילית לשימוש עם כל סוגי עדשות המגע.

מחיר לצרכן  
₪65: 500ml | ₪55: 350ml

**Bepanthen** תמלה: 20 אמפולות / בקבוקון 10ml



טיפול עיניים ללא חומר משמר עם האפקט המשולב המעניק לחות וסיכך לאורך זמן ומטפל בעיניים יבשות. מתאים גם למרכיבי עדשות מגע. מכיל חומצה היאלורונית.

מחיר לצרכן  
אמפולות: 90₪ | בקבוקון: 115₪

## מוצרים משלימים לאופטיקה

**מחסניות**



מגוון מחסניות לעדשות רכות / קשות / סקלרליות

**BIOGLO FLUORESCEIN** תמלה: 100 strips



לבדיקת התאמת עדשות מגע גמישות נשמות ובדיקות נוספות של העין

**פומפות**



מגוון פומפות להכנסה ולהוצאה של עדשות

**TEARFLOW SCHIRMER** תמלה: 250ml



לבדיקת איכות הדמעות וכמותן

**U-VIEW LAMP**




מנורת בדיקה עם אור כחול



מדריכי התאמה,  
מחשבוניים וכלי עזר  
לאבחון קל ונוח (:

מכירים את יישומון OptiExpert™? כדאי לכם!  
היישומון הקטן הזה מכיל עולם ומלואו.  
כל הכלים לאיבחון קל ומהיר נמצאים ממש אצלכם בכף היד.

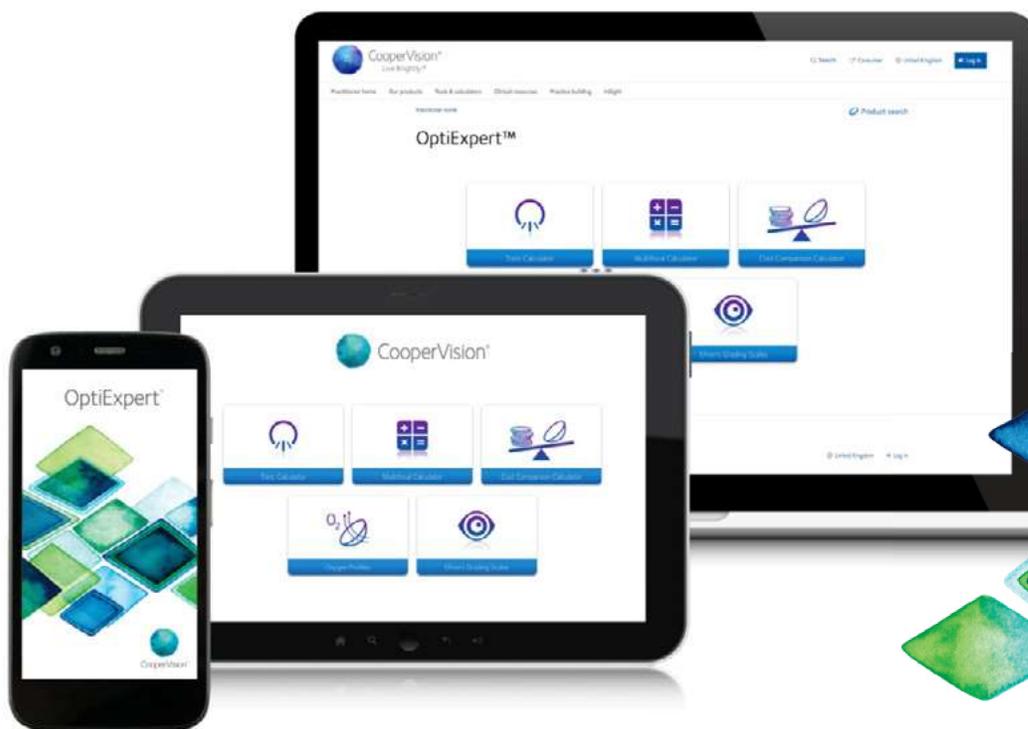

מה יש לנו כאן?

- מחשבון עדשות טוריות Vertex & Lars.
- מחשבון עדשות מולטיפוקל.
- Efron Grading Scale - אבחון ממצאים קליניים מבדיקה של משטח העין במנורת סדק (סליט למפ) כגון: ניאוווסקולרציה, אודם בלחמית ועוד

אז קדימה, תורידו, תכירו ותהנו.

ניתן להורדה בחינם מחנות האפליקציות  
סיסמא ראשונית לכניסה: biofinity



# מדריך התאמה לעדשות מולטיפוקל

על מנת לבצע התאמה קלה ומוצלחת הכנו עבורכם מדריך פשוט המכיל 3 שלבים להתאמת עדשות מגע מולטיפוקל.  
**1.** קביעת מרשם ובחירת עין דומיננטית **2.** בחירת העדשה המתאימה ביותר **3.** הערכת ההתאמה ושיפורים

## שלב ראשון - קביעת העין הדומיננטית והמרשם הספרי

### עין דומיננטית:

קביעת עין דומיננטית היא קריטית על מנת להתאים עדשות מגע למטופלים פרסביופים. אנחנו ממליצים להשתמש בשיטת הטסטוש שנותנת תוצאות טובות.

### השיטה:

- מתחילים עם מרשם המשקפיים העדכני במסגרת הבדיקה.
- משאירים את שתי העיניים פקוחות ומטשטים לסירוגין כל עין בעדשת +1.00
- העין הדומיננטית היא העין לה הטסטוש הכי הפריע.

### המרשם הספרי:

קובעים מרשם ספרי (Best Sphere) לפצינט ומוודאים חישוב ורטקס (BVC) נכון במידת הצורך. ניתן להיעזר באפליקציית OptiExpert™.

**טיפ חשוב:** קביעת עין דומיננטית תבצע תמיד לפני בחירת עדשה ספרית או טורית.

## שלב שני - בחירת העדשות המתאימות ביותר

### עדשות מגע יומיות

#### MyDay® multifocal העתיד כבר כאן.

עדשות מגע יומיות מולטיפוקליות מחומר הסיליקון הידרוג'ל הרך ביותר שלנו. מאפשרות 100% חמצן לקרנית, חדות ראייה מעולה, התאמה קלה והסתגלות מהירה.



#### clariti® 1 day multifocal (Dispo Air Multi 1 day 3 ADD)

עדשות מגע יומיות מהדור השלישי של הסיליקון הידרוג'ל, שומרות על בריאות העין ועל נוחות ההרכבה ומספקות ראייה מצויינת לכל מרחק.



### עדשות מגע חודשיות

#### Biofinity® multifocal

הדור השלישי של עדשות מגע מסיליקון הידרוג'ל משלבות חומרי גלם ואלמנטים עיצוביים על מנת להציע נוחות הרכבה וראיה בהירה לכל מרחק.



# הוראות התאמה

MyDay® multifocal עדשות יומיות  
DISPO™ Air Multi 1 Day עדשות יומיות

#1

INITIAL CONTACT LENS SELECTION		
Spectacle Rx Add	Dominant Eye	Non-Dominant Eye
0.75D to +1.25D	LOW	LOW
1.50D to +1.75D	LOW	MED
2.00D to +2.50D	LOW	HIGH

בחירה ראשונית של עדשות לנסיון:  
**עבור העין הדומיננטית**, בוחרים את המרשם המתאים לרחוק, בהתבסס על תוצאות המרשם הספרי מהשלב הראשון ונותנים ADD לקריאה LOW.

**עבור העין הלא דומיננטית**, בוחרים את המרשם הרלוונטי בהתבסס על המרשם הספרי מהשלב הראשון. ונותנים ADD לקריאה ע"פ טבלה מס' 1:

#2

DISTANCE VISION ENHANCEMENT	
	For Dominant Eye
Adjustment Steps	±0.25D
NEAR VISION ENHANCEMENT	
	For Non-Dominant Eye
Adjustment Steps	±0.25D

## אופטימיזציה למרשם העדשה

יש להשאיר את שתי עיני הפציינט פקוחות ולהשתמש בפליפר או להחזיק עדשות ולשים מול העין. אין להשתמש בפורופטר.

## אין לשנות את עוצמת ה-ADD

יש לשפר את הראיה לרחוק/ קרוב לפי טבלה מס' 2:

Worked example – Myope:

	Sphere	Cyl	Axis	ADD	Ocular dominance	Best sphere	Initial MyDay® / Dispo Air Multi 1 Day multifocal trial lens
RE	-3.00D	-0.50	180	+1.50	Non-dominant	-3.25D	-3.25 MED
LE	-2.75D	-0.50	170	+1.50	Dominant	-3.00D	-3.00 LOW

Worked example – Hyperope:

	Sphere	Cyl	Axis	ADD	Ocular dominance	Best sphere	Initial MyDay® / Dispo Air Multi 1 Day multifocal trial lens
RE	+1.75D	-0.50	180	+2.00	Dominant	+1.50D	+1.50 MED
LE	+2.25D			+2.00	Non-dominant	+2.25D	+2.25 HIGH

# הוראות התאמה

## Biofinity עדשות חודשיות

עבור העין הדומיננטית, בוחרים את המרשם המתאים לרחוק, בהתבסס על תוצאות המרשם הספרי מהשלב הראשון ונותנים ADD לקריאה עם עיצוב CENTER DISTANCE. עבור העין הלא דומיננטית, בוחרים את המרשם הרלוונטי בהתבסס על המרשם הספרי מהשלב הראשון. את עיצוב העדשות (Centre Near / Centre Distance) בוחרים בהתייחס ל-ADD הנדרש לקריאה על פי הטבלה.

ADD*	Dominant eye	Non-dominant eye
+1.00	D	D
+1.50	D	D
+2.00	D	N
+2.50	D	N


\*Always round down to the nearest available ADD. D refers to a centre-distance design. N refers to a centre-near design.

### Worked example – Myope:

	Sphere	Cyl	Axis	ADD	Ocular dominance	Best sphere	Biofinity® and Proclear® multifocal trial lenses
RE	-3.00D	-0.75	180	+1.25	Non-dominant	-3.25	-3.00/+1.00 CD
LE	-2.75D	-0.25	170	+1.25	Dominant	-2.75	-2.75/+1.00 CD

### Worked example – Hyperope:

	Sphere	Cyl	Axis	ADD	Ocular dominance	Best sphere	Biofinity® and Proclear® multifocal trial lenses
RE	+1.75D	-0.50	180	+2.00	Dominant	+1.50	+1.50/+2.00 CD
LE	+2.25D			+2.00	Non-dominant	+2.25	+2.25/+2.00 CN

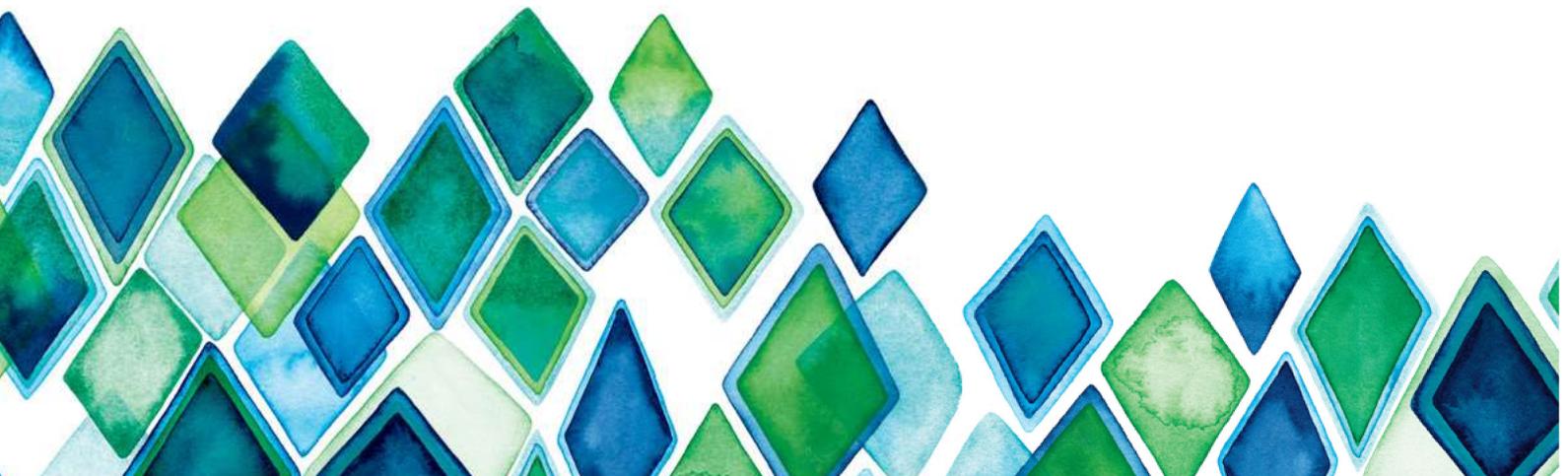

## שלב שלישי - הערכת ההתאמה ותיקון

בשלב זה בוחנים את הראיה הפונקציונאלית של המטופל בתנאי "העולם האמיתי" בראיה דו עינית. נותנים למטופל לדרג את הראיה שלו בצורה סובייקטיבית (בסולם של 1-10) במטרות שונות ובמרחקים שונים המתאימים לאורח החיים שלו (לדוגמא - תמרורים, שלטי רחוב, קריאת SMS וכו').

**טיפ חשוב:** מרכז העדשה הינו קריטי להתאמה תקינה. לשם כך יש לנו סוגים שונים של עדשות מולטיפוקל.

### הערכה

- מאפשרים לעדשות המגע להתמקם כ-10 דקות לפני שמעריכים את טיב הראיה - עדיף לבצע הערכה זו מחוץ לחדר הבדיקה.
- ציון 7 ומעלה לרחוק ולקרוב הוא מספק ואפשר להציע ללקוח עדשות לניסיון.


**טיפ חשוב:** בשלב זה כאשר העדשות בעיניים לא מומלץ להשתמש בפרופטר, ב-autorefractometer או במסגרת בדיקה.


### תיקון לרחוק

- על מנת לשפר את הראיה לרחוק, מוסיפים +0.25 או -0.25 לעין הדומיננטית כששתי העיניים פקוחות.
- בודקים אם הראיה לקרוב אינה מושפעת לרעה מהשינוי הזה.
- במקרים מסויימים, תיקון עבור **העין הלא דומיננטית** יכול גם הוא לשפר את הראיה לרחוק.

### תיקון לקרוב

- על מנת לשפר את הראיה לקרוב, מוסיפים +0.25 לעין הלא הדומיננטית כששתי העיניים פקוחות.
  - בודקים אם הראיה לרחוק אינה מושפעת לרעה מהשינוי הזה.
  - במקרים מסויימים, תיקון עבור **העין הדומיננטית** יכול לשפר את הראיה לקרוב. חשוב לוודא שאין השפעה על הראיה לרחוק.
- טיפ חשוב:** במידת האפשר עדיף לטשטש מעט את העין הלא-דומיננטית ב- +0.25 או- +0.50 ולהישאר ב-ADD נמוך.

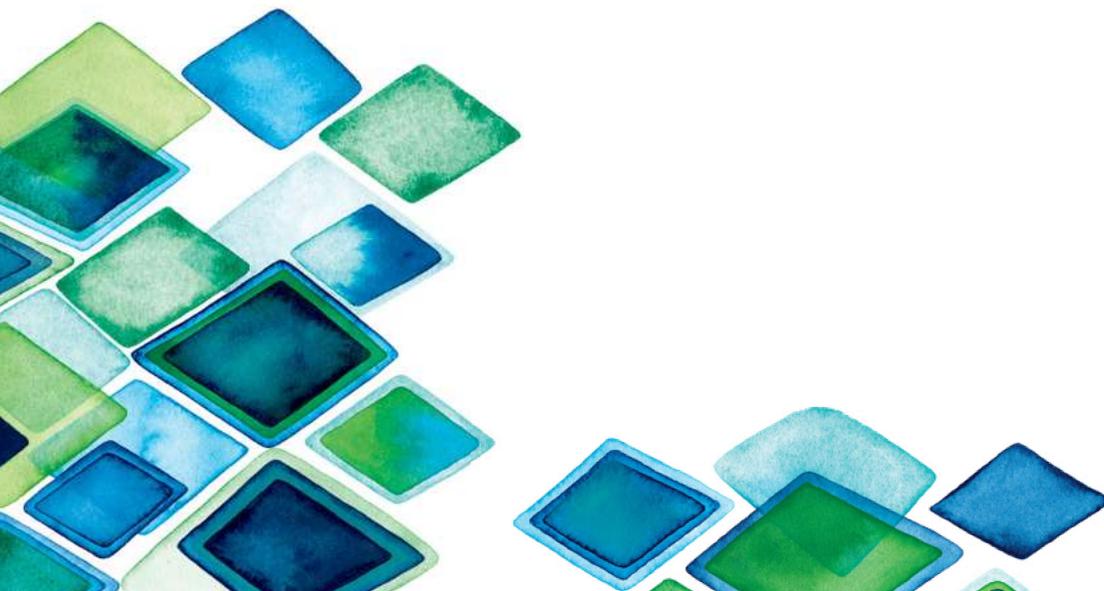

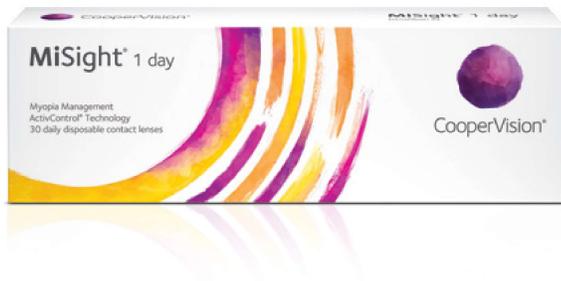

# MiSight<sup>®</sup> 1 day

## קל להתאים כמו עדשת מגע רכה חד מוקדית



יש לבצע בדיקת רפרקציה למרשם אופטימלי מומלץ להשתמש במסגרת בדיקה ולא בפרומטר, יש לבצע בדיקת רפרקציה עד לקבלת מרשם משקפיים אופטימלי ולבצע איזון דו עיני.

### טכניקה מומלצת לאיזון דו עיני:

השתמשו בעדשת +0.75D או עדשה +1.00D לערפול בעין אחת, הוסיפו בהדרגה +0.25D עד לקבלת מקסימום פלוס, חזרו על התהליך בעין השנייה.



בחירה ובדיקת העדשה המתאימה MiSight<sup>®</sup> 1 day יש לחשב את עוצמת העדשה MiSight<sup>®</sup> הראשונית לאחר חישוב Best Sphere Equivalent, יש לחשב Vertex Distance במידת הצורך. יש להמתין כ-5 דקות כשעדשות MiSight<sup>®</sup> 1 day בעיני הפציינט ולאחר מכן לבצע הערכה למרשם אופטימלי תוך שימוש בטכניקה לאיזון דו עיני. יש לתעד את חדות הראייה.

### בדקו את המרשם על עדשות המגע:

- יש להוסיף -0.25D בהדרגה, אך ורק אם יש שיפור משמעותי בחדות הראייה לרחוק.
- יש להוסיף +0.25D בהדרגה כל עוד אין השפעה על חדות הראייה לרחוק או על תחושת הראייה. הסובייקטיבית של המטופל.



### המלצות ובדיקות מעקב

- יש להמליץ על זמן הרכבה מינמלי. 6 ימים בשבוע ויותר, 10 שעות ביום ויותר
- יש לתאם בדיקות מעקב לאחר חודש ולאחר מכן מדי 6 חודשים.
- יש להנחות את המטופל (או את הורי המטופל) באופן השימוש והטיפול בעדשה.
- יש לוודא הסתגלות לראייה עם עדשות המגע.

### טיפ חשוב:

צל והילות נחשבים לתופעה נורמלית בתחילת התהליך ומוגדרים כתחושת ראייה נורמלית לטיפול זה.

Material	omafilcon A
Water content	60%
Base curve (mm)	8.7
Diameter (mm)	14.2
Sphere power	-0.25D to -10.00D (0.25D steps)
Optical design	ActivControl <sup>®</sup> Technology
Dk/t (at -3.00D)	28
Pack size	30
Replacement schedule	Daily disposable

# אנחנו מקבלים החזרות!

## לקוחות יקרים,

להלן נוהל ההחזרות המעודכן שלנו:

### התנאים לביצוע החזרה:

1. קבלת קופסאות של עדשות באריזתן המקורית, שלמות ומלאות. מטעמים מובנים לא נוכל לקבל קופסאות פתוחות ו/או פגומות.

2. קבלת קופסאות של עדשות עם תוקף של **לא פחות מ-15 חודשים** ורק אם נרכשו בטווח של שנה.

3. לא ניתן להחזיר תמיסות.

4. **החזרת עדשות ייצור- 3 עדשות ראשונות יתקבל זיכוי של 100% עד שלושה חודשים, כל עדשה נוספת תחוייב במחיר מלא (בתוקף עד לתאריך 31.12.2026).**

### כיצד ניתן לבצע החזרה:

1. ניתן לשלוח את ההחזרה עם כץ **בצירוף טופס החזרה**, על הטופס חובה לציין את **סיבת החזרה**. לצערנו לא נוכל לקבל החזרה ללא טופס מצורף. במקרה של החזרת **עדשות ייצור** חובה לרשום מס' SO או מס' תעודת משלוח.

2. במקרה של תלונה, יש להתקשר לשירות לקוחות ולקבל **מספר תלונה**. ללא מספר תלונה, לא נוכל לטפל בפנייתכם.

### הזיכוי על ההחזרות יתקבל כזיכוי בחשבונית.

בברכה,  
**קארין פרג**, מנהלת מכירות  
KPereg@CooperVision.co.il



המספר עלה  
ביותר מ- 0.50D\*?  
קבלו זוג עדשות  
עלינו  
\*בשנה הראשונה

# משקפי MiSight® באחריות

אחריות להסתגלות | אחריות לעליית מרשם | אחריות לפגמים

מה לשלוח	זיכוי ללקוח	תקופת אחריות מרכישת המוצר	האם באחריות?	סיבת ההחזרה
עדשות בלבד	אספקת זוג חדש ללא חיוב	שנתיים	כן	פגם בייצור (ציפויים, שבר, פגם בחומר הגלם, פגם בתבנית הנקודות)
עדשות בלבד	החזר כספי	45 יום	כן	אחריות להסתגלות (ראייה/נראות)
עדשות בלבד	זוג עדשות חדשות ללא חיוב	שנה	כן	שינוי במרשם של מעל 0.5 D במהלך השנה הראשונה
עדשות + מסגרת	זוג עדשות חדשות ללא חיוב	30 יום	כן	בעיות בחיתוך או במסגור, כגון: שבר במסגרת חדשה/עדשה או קבלת משקפיים במרשם שגוי
עדשות + מסגרת	זוג עדשות חדשות ללא חיוב	30 יום	כן	טעות במרכז האישון עקב מסגור לא תקין

## הוראות הזמנה והתאמה

- יש להתאים את המשקפיים תוך סימון מרכז האישון הכוללים מרחק בין אישונים חד-עיני, גובה זווית פנטוסקופית.
- יש לציין בהחזרת משקפי MiSight® את פרטי ההזמנה המלאים, כולל מס' הזמנה ושם פציינט או כרטיס אותנטיות.
- שימו לב, **לא תינתן אחריות** על נזק לעדשות בהעברת העדשות ממסגרת אחת לאחרת, או במקרים של סימון מרכז האישון בצורה שאינה מדויקת.

**BACK VERTEX DISTANCE CORRECTION TABLE**

12 mm	SP	12 mm	12 mm	SP	12 mm
4.20	4.00	-3.82	14.02	12.00	-10.49
4.48	4.25	-4.04	14.71	12.50	-10.87
4.76	4.50	-4.27	15.40	13.00	-11.25
5.04	4.75	-4.49	16.11	13.50	-11.62
5.32	5.00	-4.72	16.83	14.00	-11.99
5.60	5.25	-4.94	17.55	14.50	-12.35
5.89	5.50	-5.16	18.29	15.00	-12.71
6.18	5.75	-5.38	19.04	15.50	-13.07
6.47	6.00	-5.60	19.80	16.00	-13.42
6.76	6.25	-5.81	20.57	16.50	-13.77
7.05	6.50	-6.03	21.36	17.00	-14.12
7.34	6.75	-6.24	22.15	17.50	-14.46
7.64	7.00	-6.46	22.96	18.00	-14.80
7.94	7.25	-6.67	23.78	18.50	-15.14
8.24	7.50	-6.88	24.61	19.00	-15.47
8.54	7.75	-7.09	25.46	19.50	-15.80
8.85	8.00	-7.30	26.32	20.00	-16.13
9.16	8.25	-7.51	27.19	20.50	-16.45
9.47	8.50	-7.71	28.07	21.00	-16.77
9.78	8.75	-7.92	28.98	21.50	-17.09
10.09	9.00	-8.12	29.89	22.00	-17.41
10.40	9.25	-8.33	30.82	22.50	-17.72
10.72	9.50	-8.53	31.77	23.00	-18.03
11.04	9.75	-8.73	32.73	23.50	-18.33
11.36	10.00	-8.93	33.71	24.00	-18.63
12.01	10.50	-9.33	34.70	24.50	-18.93
12.67	11.00	-9.72	35.71	25.00	-19.23
13.34	11.50	-10.11	37.75	26.00	-19.75

**DIOPTER <=> MM CONVERSION TABLE**

mm	dpt	mm	dpt	mm	dpt
5.50	61.36	6.90	48.91	8.30	40.66
5.55	60.81	6.95	48.56	8.35	40.42
5.60	60.27	7.00	48.21	8.40	40.18
5.65	59.73	7.05	47.87	8.45	39.94
5.70	59.21	7.10	47.54	8.50	39.71
5.75	58.70	7.15	47.20	8.55	39.47
5.80	58.19	7.20	46.88	8.60	39.24
5.85	57.69	7.25	46.55	8.65	39.02
5.90	57.20	7.30	46.23	8.70	38.79
5.95	56.72	7.35	45.92	8.75	38.57
6.00	56.25	7.40	45.61	8.80	38.35
6.05	55.79	7.45	45.30	8.85	38.14
6.10	55.33	7.50	45.00	8.90	37.92
6.15	54.88	7.55	44.70	8.95	37.71
6.20	54.44	7.60	44.41	9.00	37.50
6.25	54.00	7.65	44.12	9.05	37.29
6.30	53.57	7.70	43.83	9.10	37.09
6.35	53.15	7.75	43.55	9.15	36.89
6.40	52.73	7.80	43.27	9.20	36.68
6.45	52.33	7.85	42.99	9.25	36.49
6.50	51.92	7.90	42.72	9.30	36.29
6.55	51.53	7.95	42.45	9.35	36.10
6.60	51.14	8.00	42.19	9.40	35.90
6.65	50.75	8.05	41.93	9.45	35.71
6.70	50.37	8.10	41.67	9.50	35.53
6.75	50.00	8.15	41.41	9.55	35.34
6.80	49.63	8.20	41.16	9.60	35.16
6.85	49.27	8.25	40.91	9.65	34.97

